


GoTalk 32+

Der GoTalk 32+ ist ein einfaches, aber sehr leistungsfähiges Kommunikationshilfsmittel mit natürlicher Sprachausgabe, auf dem bis zu 160 Sprachmitteilungen gespeichert werden können. Die Symbolfelder reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführaster voneinander getrennt.

Fünf Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z. B. nach Themen oder verschiedenen Benutzern. Ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema oder Benutzer ist ohne Löschen der aktuellen Mitteilungen möglich, indem die Ebene umgeschaltet und eine andere Schablone eingelegt wird. Zur Aufbewahrung der Folien gibt es ein separates Einschubfach, so sind sie jederzeit griffbereit.

3 Hauptfelder, die ohne mehrfaches Aufnehmen auf allen Ebenen die gleiche Sprachmitteilung wiedergeben, bieten Platz für häufig verwendete Aussagen.

Die GoTalk-Geräte sind sehr leicht und lassen sich mit dem integrierten Griff bequem tragen.

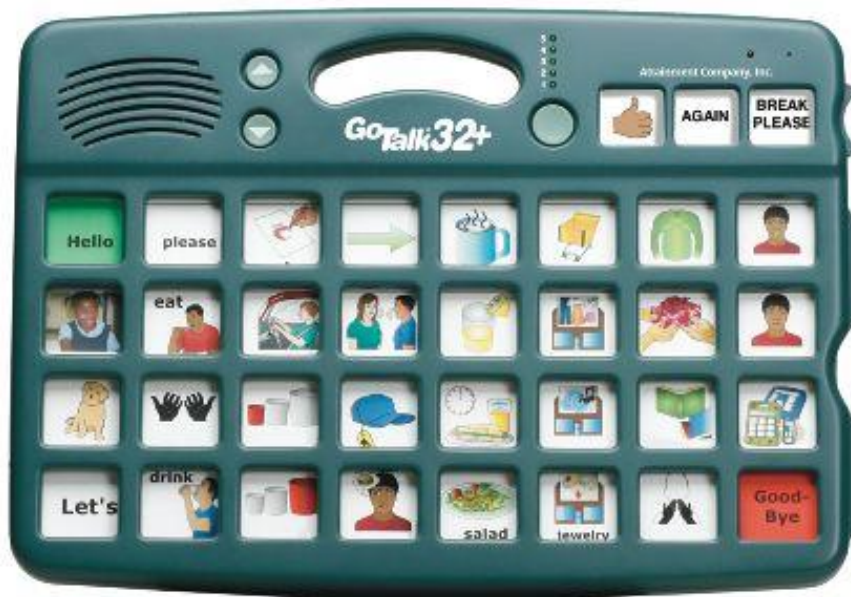


GoTalk 32+

Leistungsmerkmale:

- Sehr robustes Gerät
- Einfache Anwendung
- Geringes Gewicht
- Direkte Bedienung mit der Hand
- 5 Ebenen mit je 32 Feldern
- Bis zu 160 Sprachmitteilungen speicherbar
- 3 Hauptfelder für häufig benötigte Aussagen

Technische Details:

- Größe: 32 x 25,5 x 4,5 cm
- 3 AA Batterien

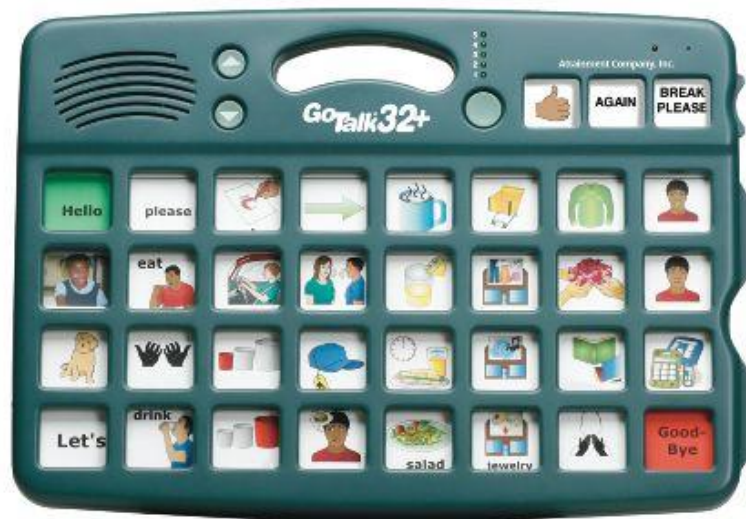

Hilfsmittelnummer: 16.99.03.0900